

Manual til kørestol model
ES-400



Lindebjerg

Betjeningspanelet.

1: Batteriindikator

Scooterens batteriindikator viser hvor meget strøm der er tilbage på scooterens batteri. Ved fuld opladning vil alle lamper lyse på indikatoren som det er vist her til venstre. Efter som strømmen opbruges vil lamperne slukke én efter én begyndende fra højre.

Når alle grønne og alle gule lamper er slukket, og kun de røde lyser, er det tid til genopladning af batteriet. Bemærk, når solen skinner kraftigt kan det se ud som om, at kun de røde lamper lyser. Skyg derfor altid for batteriindikatoren for korrekt aflæsning.

Tænd/Sluk knap.

Tryk én gang på tænd/sluk knappen for at tænde eller slukke for kørestolen.

Justering af tophastighed.

Tryk på denne knap hvis du ønsker at nedsætte kørestolens tophastighed

Joystik til kørsel af kørestolen.

Benyt joysticket til kørsel af kørestolen. Skub joysticket i den retning du ønsker kørestolen skal køre. Joysticket er fartafhængig, hvilket betyder at kørestolen vil bevæge sig hurtigere jo mere der skubbes til joysticket.

Hastighedsindikator.

Antallet af gule prikker indikerer den valgte tophast. Jo flere prikker – desto højere tophastighed.

Signalhorn


Justering af tophastighed.

Tryk på denne knap hvis du ønsker at hæve tophastigheden på kørestolen.



Frikobling af motor.

Skule der opstå en situation, hvor der er nødvendigt at skubbe med kørestolen, er det nødvendigt at frikoble kørestolens 2 motorer. Dette gøres ved at dreje de 2 frikoblingshåndtag der sidder igennem kørestolens plasticskjold. Hvert håndtag drejes en kvart omgang, og det er nu muligt at skubbe med kørestolen. Bemærk! Det er først muligt igen at betjene kørestolen med betjeningspanelet når de 2 håndtag igen er tilbage i deres oprindelige position.

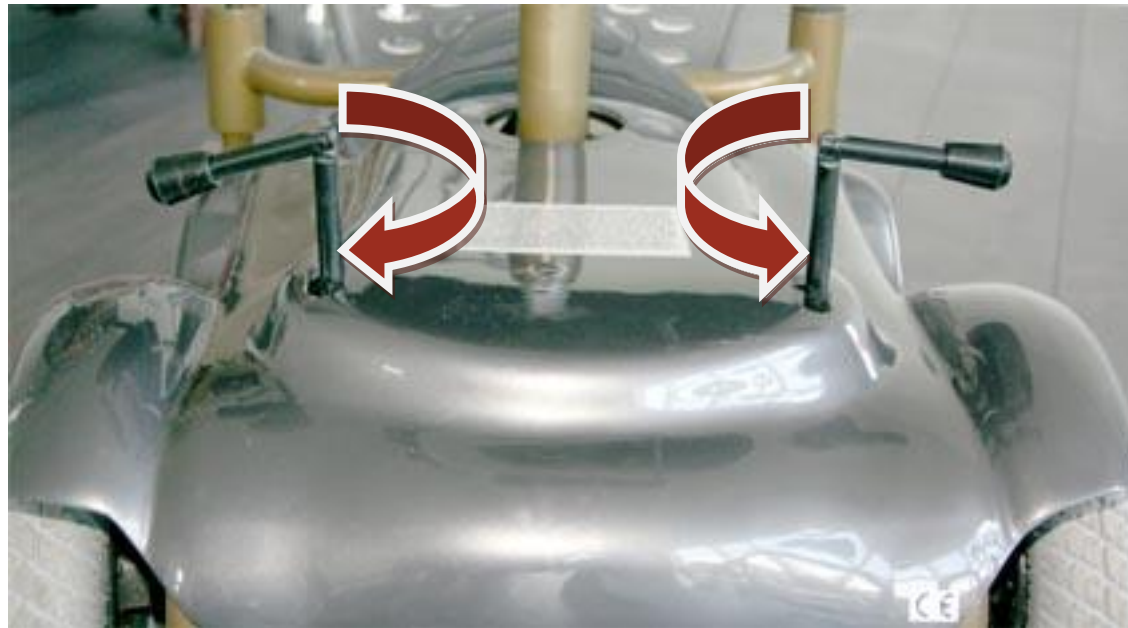

Opladning.

For at genoplade kørestolens batteri skal du benytte den medfølgende Batterioplader.

Monter den løse ledning i batteriopladeren og forbind dens anden ende I en almindelig stikkontakt.

Forbind opladerens runde stik i kørestolens ladestik. Forsikrer dig at stikket er skubbet helt i.

Tryk på "I" på opladerens tænd/slukknop.


Opladningen er nu i gang. Du vil se opladerens lysdioder blive henholdsvis Rød og Gul. Når opladningen er fuldendt vil den gule lysdiode skifte til grøn.

Vi anbefaler at sætte kørestolen til opladning 1 gang i døgnet. Opladeren stopper selv når batterier er fuldt opladt. Skal kørestolen ikke benyttes i længere tid, bør den sættes til opladning ca. hver 14. Dag.

Under opladning skal du blot slukke for din kørestol. Kørestolens batteriindikator vil Ikke informere dig om batteristatus under opladning, men kun under kørsel.



På kørestolen monteres opladeren i Stikket du finder på undersiden af Betjeningspanelet.

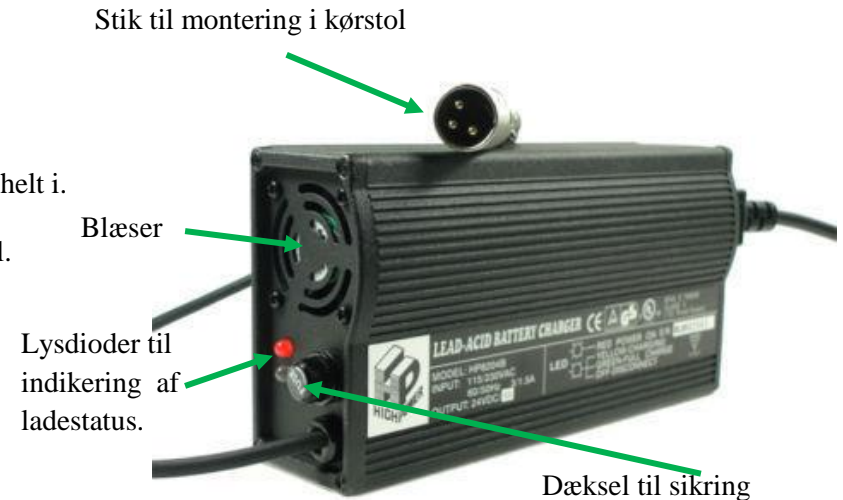

Tekniske data.

Maks. hastighed:	6,5km/t
Maks. stigning :	14% / 8grader
Vende radius :	57cm
Maks. distance :	40km
Frihøjde :	5,9cm
Længde :	103,25cm
Længde uden fodplade :	85,75cm
Brede:	58cm
Sædemål :	53cm x 44cm
Forhjul:	25cm luft gummi hjul
Baghjul:	Massive gummi hjul
Motor:	300W X 2
Bremsesystem :	intelligent motorbremse system
Batterioplader:	Intelligent extern 5 A oplader
Batteri:	12volt-40ah X 2
Bruger vægt :	120kg
Total vægt :	90kg

